


AIDE-MÉMOIRE INFIRMIÈRE-RESSOURCE


1

- Démarrer la tablette en appuyant sur le bouton de **Mise en marche** jusqu'à ce que la tablette vibre.
- Lorsque l'écran de démarrage apparaît, appuyer sur le compte « **tasputil** ».

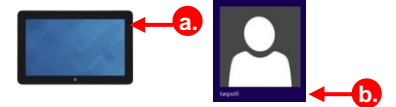

2

- Appuyer sur le **logo Reacts** pour ouvrir l'application.
- Saisir les identifiants de connexion : **Courriel** et **Mot de passe**.
Pour utiliser le clavier tactile, appuyer sur l'icône clavier située en bas, à droite de l'écran.
- Appuyer sur le bouton **Se connecter**.

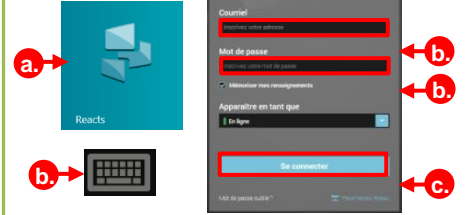


3

- Vérifier les paramètres audio/vidéo : présence de l'image de la caméra du chariot, microphone et haut-parleurs fonctionnels. **En cas de problème, consulter la Foire aux questions pour vous aider.**
- Appuyer sur le bouton **Enregistrer**.
- Positionner la caméra du chariot pour bien visionner la plaie du patient.




4

- Appuyer sur le bouton **Contacts** dans le menu d'accueil.
- Rechercher l'infirmière experte dans les contacts.

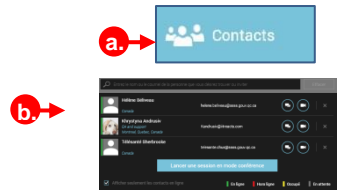

5

- Appuyer sur le bouton  pour émettre l'appel.
- Attendre la réponse de l'infirmière experte.



6

- En mode **Face à face**, attendre que l'infirmière experte commence la session.
- En mode **Session**, attendre que l'infirmière experte partage sa scène.




7

- À la fin de la clinique virtuelle, terminer l'appel en appuyant sur le bouton **Raccrocher**.
- Appuyer de nouveau sur **Raccrocher**.




8

- Quitter Reacts en appuyant sur le bouton  dans le coin supérieur droit.
- Confirmer en appuyant sur le bouton **Quitter Reacts**.
- Arrêter la tablette en appuyant sur le bouton de **Mise en marche**.




MODE FACE À FACE

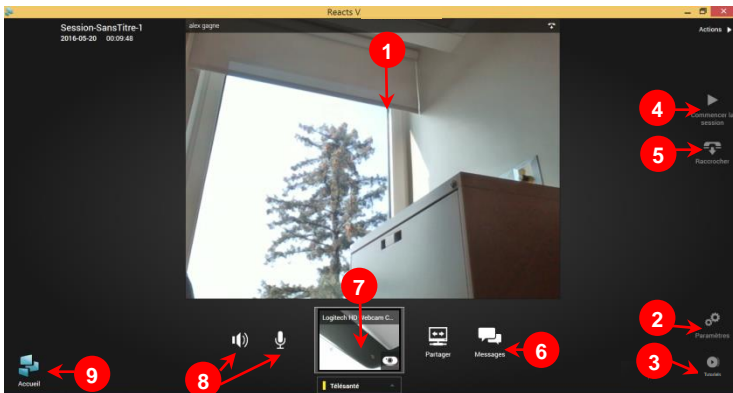


- 1 Caméra infirmière experte
- 2 Paramètres audio et vidéo
- 3 Accès aux tutoriels et à l'aide
- 4 Commencer la session
- 5 Fin de l'appel (raccrocher)
- 6 Messagerie

MODE SESSION

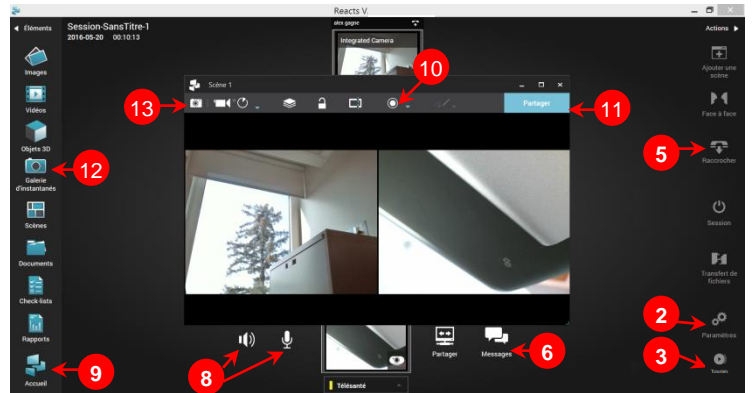

- 7 Caméra infirmière-ressource
- 8 Activer/Désactiver son et micro
- 9 Retour à l'accueil
- 10 Outil pointeur
- 11 Partage de la scène

 En cas de problème technologique, contacter le soutien technique :
Interne du CIUSSS de l'Estrie – CHUS : **15555** → option 5, option 1
Sans frais : **1 866 942-0084** → option 5, option 1

FAQ

Répertorie les problèmes les plus souvent rencontrés et les solutions pour y remédier :
www.chus.qc.ca/telesante/documentation

Mise à jour : 2018-07-05